

Drop

Η συσκευή νεφελοποίησης DROP της εταιρείας Norditalia είναι ιδανική για κατ'οίκον νοσηλεία για άτομα που αντιμετωπίζουν αλλεργίες και για ασθενείς όπως αλλεργικό ή βρογχικό άσθμα, χρόνια βρογχίτιδα, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, κυστική ίνωση, ρινίτιδα κ.α..

Αποτελείται από έναν πολύ ισχυρό συμπιεστή, ο οποίος εξασφαλίζει υψηλή πίεση λειτουργίας και συνεπώς μικρότερα νεφελοποιούμενα σωματίδια τα οποία φτάνουν ευκολότερα μέχρι τα τελευταία βρογχίδια του πνεύμονα, καθιστώντας τη θεραπεία πιο αποτελεσματική.

Νεφελοποιεί όλα τα φάρμακα εύκολα, γρήγορα και αξιόπιστα.

Η υψηλή πίεση εξασφαλίζει γρήγορο χρόνο νεφελοποίησης χάρη στις 2 ταχύτητες.

Οι συμπαγείς διαστάσεις, η λαβή, περιέλιξη καλωδίου, το περίβλημα αμπούλας και το εφεδρικό φίλτρο διευκολύνουν τη μεταφορά και την αποθήκευση. Μοντέρνος σχεδιασμός, θήκη ανθεκτική σε κραδασμούς και ελκυστικά χρώματα.



Αποδοτικός



Για όλη την οικογένεια



Γρήγορος




Αθόρυβος

0,37
ml/min

5,0
μm

TURBO
2
ταχύτητες

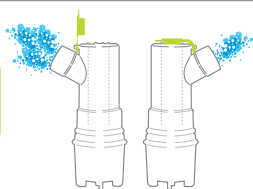

2 Ταχύτητες Neborplus ampul

Μια καινοτόμος αμπούλα (ποτηράκι) που παράγει σωματίδια με εύρος διαστάσεων αποτελεσματικό για όλους τους αεραγωγούς που προσφέρει τη δυνατότητα επιλογής της ταχύτητας νεφελοποίησης: ανοιχτό καπάκι: κανονική ταχύτητα, κλειστό καπάκι: χαμηλή ταχύτητα.

Επιτρέπει τη μείωση της σπατάλης φαρμάκων και αυξάνει την αποτελεσματικότητα της θεραπείας. Λειτουργεί επίσης σε κεκλιμένη θέση, ευνοώντας τους ασθενείς στο κρεβάτι. Κατασκευασμένο από ιατρικά πρότυπα, βιοσυμβατά και μη τοξικά υλικά.

Χωρητικότητα 8 ml. Κατάλοιπο μικρότερο από 0,5 ml.



Ρυθμός Νεφελοποίησης*

DROP	ml / λεπτό
Ανοιχτό καπάκι	0,37
Κλειστό καπάκι	0,22
MMAD	5 µm

* Τα δεδομένα ποικίλλουν ανάλογα με το φάρμακο που χρησιμοποιείται.
Τα δεδομένα μετρήθηκαν μέσω τεχνολογίας περιθλασης λέιζερ με χρήση φυσιολογικού διαλύματος.
Τα δεδομένα λαμβάνονται με νεφελοποίηση 4 ml φυσιολογικού διαλύματος.

Αξεσουάρ:



Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Πίεση λειτουργίας: 0,8 bar

Πίεση: 2,5 bar

Ελεύθερη ροή (LPM): 14 lpm

Επίπεδο θορύβου στο 1 m: 55 dBA

Ώρες λειτουργίας: Αδιάκοπα

Εγγύηση: 2 χρόνια

Βάρος: 1,6 Kg

Διαφορετική περίοδος εγγύησης μπορεί να συμφωνηθεί με την εταιρεία.
Οι τεχνικές προδιαγραφές είναι ενδεικτικές.

Όλα τα τεχνικά δεδομένα είναι κατά προσέγγιση.

Η NORDITALIA θα μπορούσε να εφαρμόσει τεχνικές, λειτουργικές και αισθητικές τροποποιήσεις χωρίς προηγούμενη συμβουλή.

NUMERO VERDE
800 642 609
ASSISTENZA CLIENTI: con servizio gratuito di presa e consegna a domicilio. Solo in Italia. Only for Italy.

ISO 13485
ISO 9001
A COMPANY WITH A QUALITY SYSTEM CERTIFIED
AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITÀ CERTIFICATO