

Meganeb Plus

Συσκευή νεφελοποίησης με έμβολο συμπίεσης για υψηλές επιδόσεις και αδιάκοπη λειτουργία. Η υψηλή πίεση λειτουργίας εξασφαλίζει γρήγορο χρόνο νεφελοποίησης, εξαιτίας των 2 ταχύτητων Neborplus Amrul. Μεγάλος χώρος αποθήκευσης των αναλωσίμων, εύκολο στο καθάρισμα. Λαβή, περιέλιξη καλωδίου και ανταλλακτικό φίλτρο. Κομψή και λειτουργική σχεδίαση, πλαστική θήκη ανθεκτική στη σύγκρουση.



Αποτελεσματικό



Για όλη την οικογένεια



Γρήγορο



Αθόρυβο



Διπλό Pixer

0,54
ml/min

2,82
μm

EXTRA POWER

1,0 bar



Στοχευμένη νεφελοποίηση




Στοχευμένη νεφελοποίηση


Υψηλή απόδοση
Χωρίς διαλογέα

Ολοκληρωμένη Θεραπεία
Πράσινος διαλογέας


Βαθιά Θεραπεία
Πράσινος διαλογέας

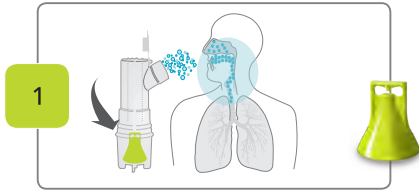


1 MMD 7,00 μm

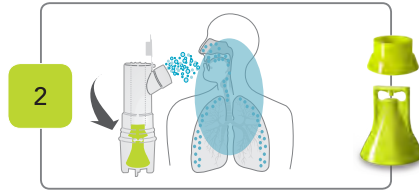

2 4,34 μm

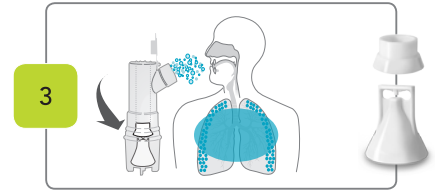

3 2,82 μm

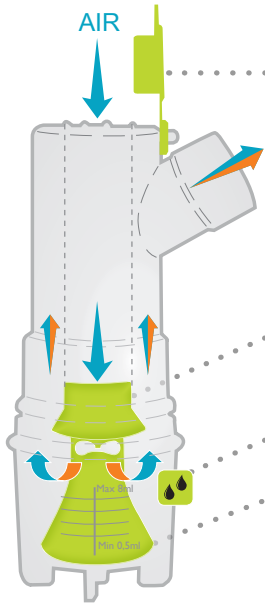


2 Ταχύτητες ΒΥΣΜΑ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΡΟΗΣ.
ανοιχτό καπάκι: κανονική ταχύτητα
κλειστό καπάκι: χαμηλή ταχύτητα

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΑ ΥΨΗΛΟΥ
ΙΞΩΔΟΥΣ

ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟ

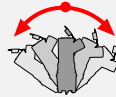

Ρυθμός νεφελοποίησης

MEGANEB PLUS	1	2	3
	ml/min		
Ανοιχτό καπάκι	0,62	0,54	0,34
Κλειστό καπάκι	0,39	0,28	0,20

* Τα δεδομένα ποικίλλουν ανάλογα με το φάρμακο που χρησιμοποιείται.
Τα δεδομένα μετρήθηκαν μέσω τεχνολογίας περιθλασης λέιζερ με χρήση φυσιολογικού διαλύματος.
Τα δεδομένα λαμβάνονται με νεφελοποίηση 4 ml φυσιολογικού διαλύματος.

Αξεσουάρ:



Neboplus
Αμπούλα
(ποτηράκι)



Μάσκα Ενηλικού



Μάσκα Παιδική



Ακροφύσιο
μύτης Ενηλικού



Ακροφύσιο
μύτης Παιδικό



Στόμιο



Σωλήνας



Πράσινος διαλογέας
& ρίχτερ



Λευκός διαλογέας
& ρίχτερ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Πίεση: 3,3 bar

Ελεύθερη ροή (LPM): 15 lpm

Επίπεδο θορύβου στο 1 m: 55 dBA

Ώρες λειτουργίας: Αδιάκοπα

Εγγύηση: 3 χρόνια

Βάρος: 1,93 Kg

Διαστάσεις (Μ*Φ*Υ cm): 62 x 28 x 39

Διαφορετική περίοδος εγγύησης μπορεί να συμφωνηθεί με την εταιρεία.

Οι τεχνικές προδιαγραφές είναι ενδεικτικές.
Όλα τα τεχνικά δεδομένα είναι κατά προσέγγιση.

Η NORDITALIA θα μπορούσε να εφαρμόσει τεχνικές, λειτουργικές και αισθητικές τροποποιήσεις χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

NUMERO VERDE
800 642 609

ASSISTENZA CLIENTI: con servizio gratuito di giorno e consegna a domicilio. Solo in Italia. Only for Italy.

ISO 13485 ISO 9001

A COMPANY WITH A QUALITY SYSTEM CERTIFIED AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITÀ CERTIFICATO

The breath of wellness

ITALIAN
QUALITY & DESIGN